



HEINE BETA X VET

Ophthalmoskop

Präzise Diagnostik für alle Felle.

Optimiert für die hygienische Wiederaufbereitung

- Kratzfestes Sichtfenster aus gehärtetem Glas
- smoothSURFACE und versenkter USB-C Anschluss

Langlebig, leicht und ergonomisch

- Massiver integrierter Aluminiumrahmen
- Gehäuse aus einem speziellen, hochschlagfesten Materialmix, thermogeformt und optimiert für die hygienische Wiederaufbereitung
- Perfekt ausbalanciert für hervorragende Ergonomie und sichere Handhabung

Smarte Stromversorgung

- Ladezustandsanzeige
- Automatische Ausschalt-Funktion
- Wiederaufladbar mit USB-C oder Ladestation



Sehr guter Refraktionsausgleich

Genauere Fokuseinstellung wählbar in 74 einzelnen Dioptrienritten von -36D bis +38D

Smarter Helligkeitsregler mit Mikroprozessorsteuerung

- Einfache Bedienung mit dem Daumen
- Schnelles Drehen des Reglers, um die Beleuchtungsstärke deutlich zu verändern
- Langsames Drehen des Reglers für präzise Feineinstellung der Beleuchtungsstärke
- Stufenlose Dimmbarkeit zwischen 1 und 100 %
- Drücken des Reglers für Ein/Aus
- Startet beim Einschalten immer mit der zuletzt verwendeten Beleuchtungsstärke





HEINE BETA X VET

Ophthalmoskop

Gestochen scharfe, klare Sicht auf den Fundus mit dem neuen optischen System AOS⁺ und LED^{HQ}

- Das Asphärische Optische System AOS⁺ reduziert Hornhautreflexe noch effektiver durch die optimierte Trennung von Beleuchtungs- und Beobachtungsstrahl
- LED^{HQ} Beleuchtung für gleichmäßige, helle Ausleuchtung mit naturgetreuer Farbwiedergabe für hohen Kontrast und äußerst detaillierte Darstellung
- Staubdichtes Design des optischen Systems

Der neue einschwenkbare Polfilter


Je nach Bedarf und Untersuchungsziel:

- **Mit Polarisation:** Reduziert Cornea Reflexe und Streulicht
- **Ohne Polarisation:** Wallreflex (macular reflex) und arteriöler Lichtreflex (Silberdraht- und Kupferdrahtarterien) deutlich erkennbar



7 verschiedene Blenden

Alle Blenden auch mit Rotfrei- und Polfilter nutzbar

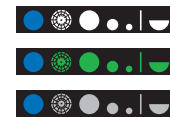

Die neue HEINE focusCONTROL

Einfach umschalten zwischen Fokus auf vorderem Augenabschnitt und Augenhintergrund



HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG

Dornierstr. 6, 82205 Gilching, Germany
www.heine.com



Technische Änderungen vorbehalten.

01 | 26.

QUALITY
MADE IN GERMANY

